

# Pariboy, hantering

**Pariboy/nebulisator är ett inhalationshjälpmedel.**

**Denna används för att kunna administrera läkemedel vid olika obstruktiva luftvägssjukdomar såsom exempelvis Astma och KOL. Symtomlindring uppnås genom att luftvägarna slappnar av och vidgas.**



## **Ordination**

Det är läkare som ordinerar att inhalationsläkemedel ska ges via pariboy/nebulisator. Läkare förskriver utrustningen via ett så kallat hjälpmedelskort. Apoteket beställer sedan hem aktuell produkt till patienten.

## *Handhavande och förvaring*

### **Inför inhalationen**

Noggrann handhygien krävs före varje inhalering för att förhindra att bakterier och virus förs in via inhalationen till luftvägarna och där orsaka infektion, exempelvis lunginflammation.

### **Förberedelser**

lordningställ pariboyen/nebulisatorns olika delar enligt tillverkarens bruksanvisning.

Inhalationslösningen ska förvaras i originalförpackningen, vid högst 25 grader samt undvika solljus då det är ljuskänsligt.

Endosbehållare med läkemedlet ska ges direkt efter öppnandet.


Om det finns endosbehållare som är delvis använd, öppnad eller skadad ska den slängas.

Töm läkemedlet i pariboyen/nebulisatorns kammare. Stäng locket.



### **Inhalation**

Kolla att det "ryker" ur munstycket/masken. Ta munstycket mellan tänderna och låt läpparna sluta tätt om munstycket. Om mask används, se till att den sluter tätt. Andas in långsamt och djupt genom munstycket/masken. Andas sedan ut långsamt och fullständigt.

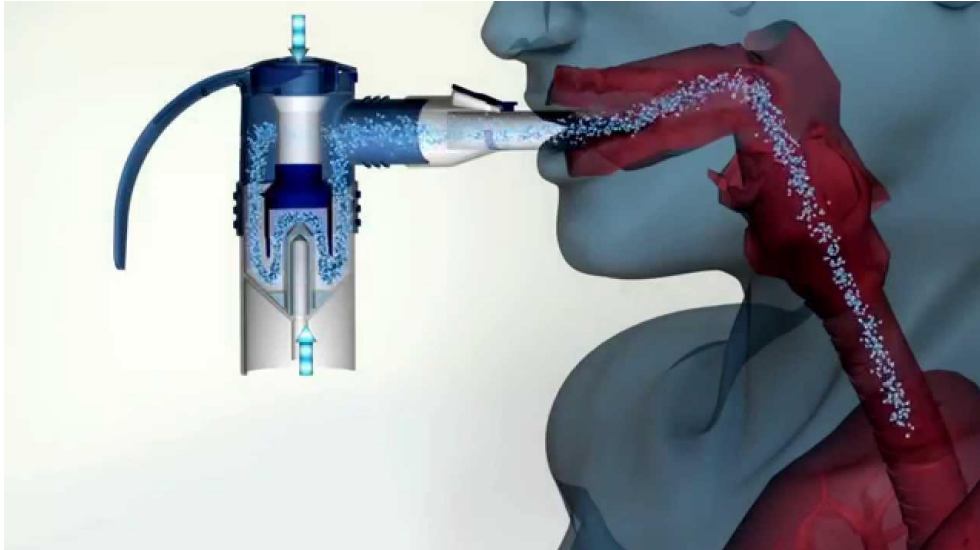

Ett förändrat ljud från pariboyen/nebulisatorn signalerar att inhalationen kan avslutas.

Stäng av apparaten. Ta bort pariboyen/nebulisatorn från slangen och ta ur kontakten från elnätet.

### **Hygien**

Rengöring och desinficera pariboyen/nebulisatorn enligt bruksanvisningen från tillverkaren.

Rengöring ska göras efter varje användning. Desinficering görs 1 gång per dag.

### **Rengöring**

Pariboyen/nebulisatorns alla beståndsdelar (förutom anslutningsslangen) ska noggrant rengöras cirka 5 minuter i varmt kranvatten och diskmedel.

Skölj därefter de olika delarna under rinnande varmt vatten.

Skaka bort överflödigt vatten. Håll dock fast locket i pariboyen/nebulisatorns övre del för att inte skada gångjärnet vid skakningarna.

Om det finns fukt i anslutningsslangen kan kompressorn arbeta tills luften strömmar ut ur slangen, fukten torkar då upp.

### **Desinficering**

Desinficering görs efter rengöringen.

Desinficera de olika delarna av pariboyen/nebulisatorn genom att koka dem i vatten i minst 5 minuter. Använd ren kastrull och färskt dricksvatten.

## **Torkning och förvaring**

Skaka av de olika delarna efter rengöring och efter desinficering. Var försiktig med locket på pariboyen/nebulisatorn.

Lägg delarna på ett torrt, rent och absorberande underlag, exempelvis en kökshandduk, och låt dem torka fullständigt. Förvara pariboyen/nebulisatorn så att den inte under längre tid utsätts för solljus.

Filter bör kontrolleras efter var 10:e inhalation, byts dock efter 200 driftstimmar eller varje år. Minst 1 gång om året ska filter och anslutningsslang bytas.

*Instruktionsfilm för Pariboy:*

<https://www.medicininstruktioner.se/mediplast/pari-boy-sx/>

Källa:

PARI med bruksanvisning för PARI BOY SX  
FASS

